

N° de série : 21041246	N° Document : 58V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 2 / Ref Dutscher: 061104	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.1-2 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 14:39:30

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,2 µl

Moyenne : 0,208 µl	Minimum : 0,194 µl	Maximum : 0,221 µl		
Erreur systématique Ev : 0,008 µl	E% 4,15 %	Tolérance E : 0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl	CV% 4,36 %	Tolérance S : 0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
0,202	0,209	0,220	0,193	0,193
0,213	0,209	0,209	0,212	0,216

Volume : 1 µl

Moyenne : 1,031 µl	Minimum : 1,018 µl	Maximum : 1,043 µl		
Erreur systématique Ev : 0,031 µl	E% 3,06 %	Tolérance E : 0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,008 µl	CV% 0,75 %	Tolérance S : 0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
1,029	1,035	1,021	1,039	1,025
1,015	1,023	1,020	1,029	1,035

Volume : 2 µl

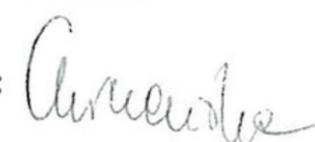
Moyenne : 2,046 µl	Minimum : 2,027 µl	Maximum : 2,063 µl		
Erreur systématique Ev : 0,046 µl	E% 2,31 %	Tolérance E : 0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,011 µl	CV% 0,53 %	Tolérance S : 0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
2,020	2,039	2,032	2,037	2,044
2,028	2,052	2,038	2,046	2,056

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561 **Liquide utilisé :** Eau distillée
Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) *Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011*
méthode gravimétrique : procédure PLM050 *référentiel : ISO 8655*

Température : 22,8 °C **Pression :** 1001,3 hPa **Hygrométrie :** 71,9 %
Pointe : **ClearLine 028200CL** **Evaporation :** 0 mg **Facteur :** 1,0034 µl/mg
ClearLine 035200CL (Low Binding)

Accurate Poly Services
Rue Geiler de Kaysersberg
67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

Laboratoire de Métrologie